

Punto di partenza: la Qualità Punto di arrivo: il Prezzo



Laboratorio



Industria



Gioielleria



Scuola

Le nuove bilance PL-S possiedono tutto ciò di cui una bilancia ha bisogno senza influire sui costi. E la qualità è quella a cui METTLER TOLEDO Vi ha abituati.



Punti di forza

- Pochi tasti, facile utilizzo, guida logica a menù
- Grande display a cristalli liquidi ad alto contrasto, che consente una lettura da qualsiasi angolazione anche in condizioni d'illuminazione sfavorevoli
- Processi di pesata ottimizzati grazie alle impostazioni memorizzabili del menu
- Evidente, all'avanguardia, insostituibile: la qualità e il know how METTLER TOLEDO

Molteplici impieghi

- Robusta e indistruttibile, adatta agli impieghi quotidiani più severi
- Ampia scelta di programmi applicativi: tutto ciò che Vi serve
- Accessori per impieghi specifici: acquistate solo ciò di cui avete veramente bisogno

Grande libertà

- Piatto della bilancia grande con un design compatto ed estremamente maneggevole
- Funzionamento a batteria per lavorare senza essere collegati alla rete d'alimentazione
- Completa mobilità con l'AccuModul incorporato (opzionale)
- Spegnimento automatico per il risparmio energetico

Caratteristiche tecniche e dotazione



Modello (n. d'ordine)	Risoluzione	Portata	Ripetibilità (s)	Linearità	Piatto Ø mm	Peso kg	Prezzo di listino
PL202-S	0,01 g	210 g	± 0,008 g	± 0,02 g	120	1,0	
PL601-S	0,1 g	610 g	± 0,08 g	± 0,2 g	160	1,2	
PL1501-S	0,1 g	1510 g	± 0,08 g	± 0,2 g	160	1,3	
PL6000-S	1 g	6100 g	± 0,8 g	± 2,0 g	160	1,3	

Caratteristiche delle bilance PL-S:

- Regolazione automatica mediante l'utilizzo di un peso esterno
- Funzione di conteggio pezzi
- Pesata percentuale
- Indicazione dell'unità
- Fattore personalizzato*
- Pesata dinamica* (pesata di animali)
- Pesata ±*
- Indicazione di diverse unità di misura, possibilità di commutare da un'unità all'altra: g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, gN, dwf, momme, mesghal, tael (3), tical, tola, bah
- Spegnimento automatico (possibilità di impostare il tempo)
- Memorizzazione delle impostazioni specifiche per la bilancia


Ampia dotazione di base:

- Display LCD luminoso a 7 segmenti
- Involucro in plastica resistente agli urti (ABS/PC)
- Protezione integrata dai sovraccarichi
- Alimentatore specifico a seconda dei paesi
- Funzionamento a batteria pari a 25-30 ore (batterie standard)
- Dispositivo incorporato per pesare sotto la bilancia
- Dimensioni compatte: 194 x 225 x 67 mm

Accessori per personalizzare la Vostra bilancia:

- AccuModul incorporato con batterie standard; alimentazione completamente automatica per un funzionamento di 15-20 ore
- Interfaccia RS232C per il collegamento con stampante, PC, display secondario
- Valigetta per il trasporto (per bilancia, alimentatore, pesi, batterie)
- Dispositivo antifurto
- Stampante su carta comune
- AccuPac esterno (funzionamento circa 15 ore)
- Display secondario
- Masse campione per la regolazione

* disponibile da luglio 2002

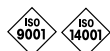

Certificato di qualità ISO9001
Certificato di qualità ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Assistenza a livello mondiale

Con riserva di apportare modifiche tecniche
© 03/2002 Mettler-Toledo GmbH
Printed in Switzerland 11795337
MCG MarCom Greifensee



METTLER TOLEDO

**Il nuovo
punto
di partenza!**