



Explorer®

Bilancia per Farmacie Approvata CE

Semplicità ed affidabilità per soddisfare le esigenze in Farmacia.

Quando avete bisogno di una bilancia affidabile e semplice da utilizzare, allora vi occorre una bilancia Ohaus Explorer®

La bilancia per Farmacie Ohaus Explorer® è l'ideale per l'utilizzo in Farmacia. La portata di 510g e la risoluzione di 1mg (approvata a 0,01g) garantiscono la piena conformità alle prescrizioni specificate dalla Farmacopea Italiana. La funzione InCal (regolazione tramite massa interna motorizzata) assicura una pesata affidabile e precisa in ogni luogo e in ogni condizione di utilizzo. Un cursore a quattro tasti, rende semplice la navigazione all'interno del menù per l'accesso alle diverse applicazioni. Il paravento in vetro con tre finestre scorrevoli, l'uscita RS232 con protocollo GLP per collegamento a PC o a stampante ed un ampio display LCD, fanno di Explorer la bilancia ideale.

Riconosciuta dal mercato come la miglior bilancia della sua categoria e con rapporto prezzo/prestazioni estremamente vantaggioso, Explorer è la scelta giusta per ogni Farmacia moderna.

Caratteristiche standard:

- Menù applicazioni semplice tramite il cursore a 4 tasti
- Ampio display LCD per indicazione peso e guida operatore con messaggi alfanumerici
- Funzione InCal (regolazione tramite massa interna motorizzata)
- Livelli di filtri regolabili per lavorare in diverse condizioni ambientali
- Numerose unità di misura più unità di misura personalizzabile
- Possibilità di blocco menù
- Piatto di pesata in acciaio inossidabile
- Gancio per pesata da sotto
- Pesata ; Pesata animali ; Conteggio pezzi ; Pesta Percentuale (non LFT)
- Interfaccia seriale RS232 con protocollo GLP per collegamento a PC o stampante
- Modello Approvato CE

Explorer® Bilancia per Farmacie Approvata CE

Specifiche tecniche

Portata x Risoluzione (d)	510g x 0.001g
Portata x Risoluzione Approvata (e)	510g x 0.01g
Ripetibilità (Dev. Standard) (g)	0.0015
Linearità (g)	± 0.002
Unità di misura	G, mg, oz, oz t, ct, dwt, tael (3), mommes, gn, ti, N, più 1 unità personalizzata
Applicazioni	Pesata; Pesata animali; Conteggio pezzi; Pesata percentuale (non LFT)
Display	LCD da 1,5 cm con caratteri alfanumerici
Campo di Tara	Sottrattivo fino alla portata totale
Tempo di stabilizzazione	≤ 3 Secondi
Alimentazione	220-240 Vac, 50Hz
Regolazione (Calibrazione)	Con masse esterne / con masse interne motorizzate (InCal)
Dimensioni piatto	12 mm
Dimensioni bilancia (LxAxP)	350 x 210 x 350 mm
Peso Netto	6 kg
Modello	E15135
N° d'ordine	80109000

Tab. 6 Farmacopea Ufficiale Art. 34 e 44 del Reg. Serv. Farm.


"... la bilancia sensibile a 1 mg della portata di almeno 500 g ..."

D.L. del 29/12/1992 Le bilance utilizzate per:

"... la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia ... devono recare il marchio di conformità CE e il contrassegno attestante l'omologazione metrica."



Schema dimensioni esterne

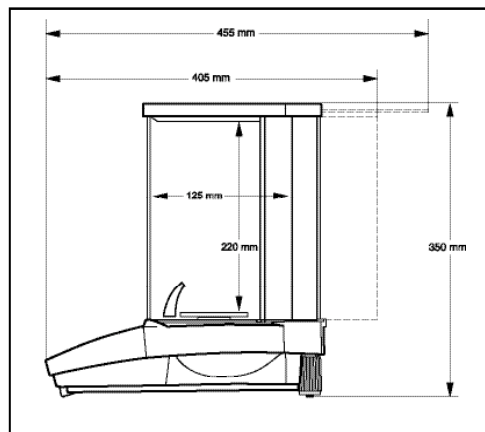

GEASS Strumentazione
Via Ambrosini 8/2
10151 Torino (ITALIA)
Tel.: +39 011.22.91.578
Fax: +39 011.27.45.414
e-mail: info@geass.com

ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

Indirizzo Internet: www.geass.com

