




## La nuova Sartorius CP. Senza uguali nella sua categoria. Modello CPA16001S

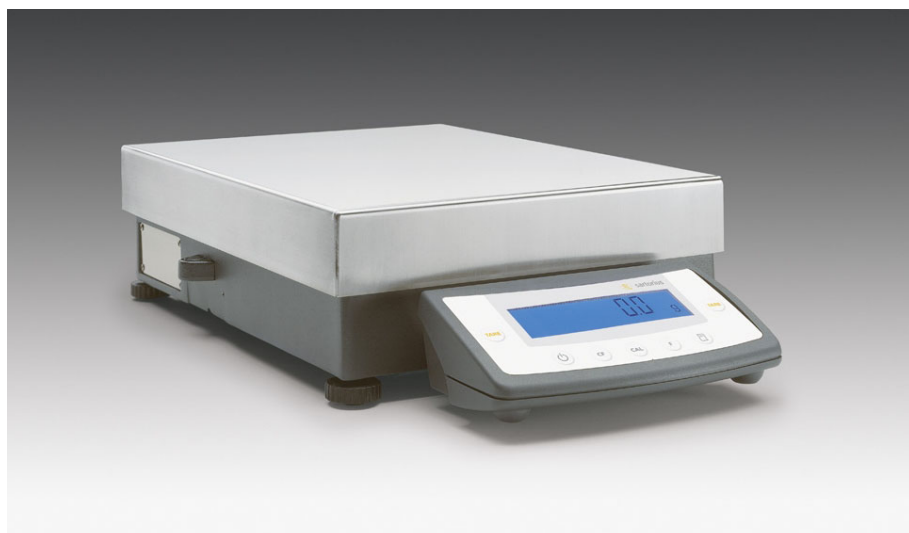

### La dotazione di serie.

- Massimo comfort di lettura del display a forte contrasto, con cifre particolarmente grandi: 16,5 mm
- Peso di calibrazione interno motorizzato: per la massima precisione di pesata premendo solo un tasto
- Funzione di calibrazione e regolazione, isoCAL. Garantisce sempre l'elevata precisione della bilancia mediante una regolazione completamente automatica ad intervalli regolari
- Tecnologia di pesata con sistema monolitico: robusta, precisa, affidabile per anni
- Meccanica integrata che protegge efficacemente il sistema di pesata da sovraccarichi e urti laterali contro il piatto di pesata
- Costruzione dell'alloggiamento robusta e in materiale con compatibilità chimica elevata: caratteristiche che rendono la bilancia resistente all'uso quotidiano
- Facile utilizzo; tutti i tasti con chiara sensazione di pressione; pannello dei comandi ben ordinato
- Quattro livelli di filtraggio digitali per un adattamento ottimale della bilancia alle condizioni ambientali
- Grande piatto di pesata
- Interfaccia dati RS-232C
- Documentazione e stampa conforme a ISO/GLP della calibrazione, regolazione e dei dati di pesata in collegamento con una stampante dati opzionale o un PC
- Programmi applicativi integrati: conteggio, pesata in percentuale, formulazione, pesata media di animali in movimento e commutazione tra 2 diverse unità di misura

Modello	CPA16001S
Campo di pesata	16.000 g
Divisione di lettura	0,1 g

## Dati tecnici

Modello	CPA16001S
Campo di pesata	16.000 g
Divisione di lettura	0,1 g
Campo di tara (sottrattiva)	16.000 g
Riproducibilità (scostamento standard)	$\leq \pm 0,1$ g
Scostamento di linearità	$\leq \pm 0,2$ g
Tempo di stabilizzazione (tipico)	$\leq 2$ s
Campo di temperatura di lavoro	+10...+30 °C
Peso netto, circa	16 kg
Dimensioni del piatto di pesata	300x400 mm
Dimensioni (LxPxA)	313x532x120 mm
Alimentazione, Tensione	tramite un alimentatore a rete STNG6 230 VAC oppure 115 VAC, +15%...-20% (grado di protezione IP20)
Potenza assorbita (tipico)	massimo 16 VA; tipico 8 VA
Interfaccia incorporata	RS232C-S/V24-V28

Accessori a richiesta	Codice
Stampante con data, ora e funzione statistica	YDP20-OCE
Display supplementare, LCD, grandezza delle cifre di 13 mm, a riflessione	YRD02Z
Display supplementare, LCD, grandezza delle cifre di 15 mm, retroilluminato	YRD03Z
Cavo d'interfaccia RS-232C/USB per connettere la bilancia ad un PC con porta USB, lunghezza 1,5 m	YCC01-USBM2
Batterie ricaricabili esterne	YRB06Z
SartoCollect; software per la comunicazione dati tra bilancia e PC (incl. cavo di collegamento 25 pin/9 pin, 2 m)	YSC02
Peso per la regolazione / calibrazione esterna: 10 kg, classe F1	YCW7138-00



Stampante



SartoCollect

Sartorius AG  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Germania

[www.geass.com](http://www.geass.com)

Con riserva di modifiche tecniche

Data: Ottobre 2008  
Versione: 1.0