




Evaporatore rotante Hei-Vap Expert Control con controllo del vuoto, facilità e diminuisce le tempistiche del ciclo di lavoro. Display touch-screen da 5", con intero controllo su parametri e funzionalità dello strumento.

2 manopole indipendenti per il controllo del vuoto diretto e per il controllo della rotazione. Libreria solubile e personalizzabile. Possibilità di salvare i processi di evaporazione anche con le varie rampe utilizzate. Programma DAA (Dynamic Autoaccurate Program) che organizza e programma l'evaporazione consentendo cicli di lavoro non presidiati. Interfaccia USB e Micro SD

Evaporazione automatica DAA con evaporatore Heidolph Hei-Vap Expert Control

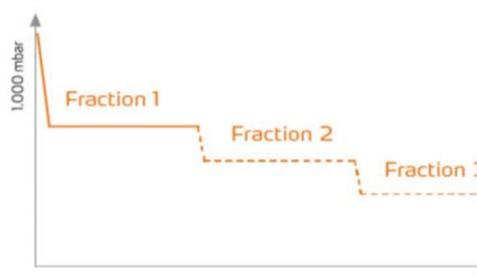

- I vari punti di ebollizione di una o più frazioni sono identificate attraverso la gradazione della temperatura del vapore (della miscela) durante il controllo continuo della pressione automatica.
- Possibilità di impostare liberamente di una o più frazioni che devono essere distillate, inoltre, il vuoto è completamente automatico per ogni frazione.
- Possibilità di controllare la velocità di evaporazione, regolando il rapporto tra temperatura del vapore e la temperatura di raffreddamento.
- Campioni distillati con elevata precisione