

Bilancia pesapersona KERN MPB

Bilancia pesapersona professionale con funzione BMI




KERN MPB-P  
con stativo



KERN MPB  
con apparecchio  
indicatore separato

**Rivenditore specializzato KERN**

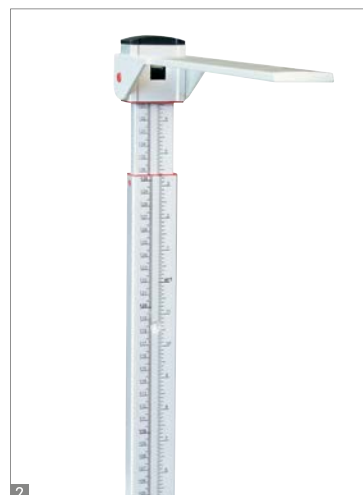

### Caratteristiche

- Stabile piatto di pesata con superficie antiscivolo e antiusura
- Igienica e facile da pulire
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Pesata senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti
- Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente "congelato" fino a quando viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere con calma il valore di pesata
- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
- Supporto a parete di serie per il montaggio a muro dell'apparecchio indicatore, solo per modelli senza stativo
- Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete


### Dati tecnici

- Display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piatto di pesata LxPxA 315x300x60 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
- Solo MPB-P: Dimensioni totali (incl. stativo) LxPxA 315x440x1010 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore (solo modelli senza stativo) ca. 120 cm
- Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5V AA, non comprese, autonomia fino a 170 h
- Alimentatore (esterno) di serie
- Peso netto MPB ca. 4,6 kg; MPB-P ca. 6,4 kg

### Accessori

- 1 Stabile valigia-custodia per trasportare e custodire la bilancia con la massima protezione, solo per modello senza stativo, KERN MPS-A07
- 2 Statimetro meccanico, campo di misurazione 60 - 200 cm, da avvitare allo stativo (MPB-P) o per il montaggio a parete, KERN MSF 200
- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, KERN EOB-A02
- Panni per la pulizia, salviette senza alcool per la disinfezione con panno, ad azione rapida, basate su moderni composti di ammonio quaternario, anche contro i papovavirus. Particolarmente delicate sui materiali, pertanto adatte per la disinfezione di prodotti medicali sensibili all'alcool. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 80 pezzi, salvietta da 20x22 cm, KERN MYC-01

DI SERIE

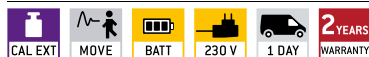

SU RICHIESTA



| Modello      | Portata<br>[Max]<br>kg | Divisione<br>[d]<br>kg | Su richiesta<br>Certificato DAKKS |         |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|
|              |                        |                        | DAKKS<br>KERN                     | 963-129 |
| KERN         |                        |                        |                                   |         |
| MPB 300K100  | 300                    | 0,1                    |                                   | 963-129 |
| MPB 300K100P | 300                    | 0,1                    |                                   | 963-129 |

### Pittogrammi



**Programma di calibrazione CAL:**  
Per la registrazione della precisione.  
Richiede un peso di calibrazione esterno.



**Pesata senza vibrazioni:** In caso di condizioni ambientali instabili, viene calcolato un valore di pesatura stabile eseguendo una media dei valori rilevati



**Funzionamento a pile:** Predisposta per il funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio.



**Alimentatore:**  
230V/50Hz standard UE. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.



**Calibrazione DAKKS:**  
Nel pittogramma è specificata la durata della calibrazione DAKKS espressa in giorni.



**Invio di pacchi tramite corriere:** Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.



**Garanzia:**  
Il periodo di garanzia è specificato nel pittogramma.